

DÉSIGNATION

SIGNAL BROSSE À DENTS DOUBLE ACTION

DURETÉS

Souple et Médium

PRIX

PMC* : 2,49€

INDICATION

Brosse à dents avec une double tête et un cou "torsion" pour une adaptabilité optimale

CARACTERISTIQUES

- **Double tête ronde**, avec 2 hauteurs de poils, à bout arrondi :
 - à l'extérieur : des poils plus hauts conçus pour un nettoyage doux du bord gingival et des espaces interdentaires
 - au centre : des poils plus courts pour éliminer efficacement la plaque à la surface des dents
- **Cou "torsion"** : conçu pour bouger délicatement de gauche à droite et s'adapter à la forme des dents. Il est composé d'une structure polypropylène spéciale incorporant un élastomère thermoplastique afin de donner une flexibilité latérale optimale au cou de la brosse
- **Cou à 3 angles** : inspiré du matériel professionnel, pour atteindre plus facilement les zones difficiles d'accès

DESCRIPTIF

Signal Double Action combine 2 caractéristiques innovantes afin d'épouser au mieux la forme des dents et offrir un nettoyage optimal :

- un **cou "torsion"** qui bouge délicatement de gauche à droite
- une **double tête** avec deux hauteurs de poils



Elle offre +25%* d'adaptabilité à la forme des dents

*test laboratoire, comparé à une brosse avec un cou standard et des poils réguliers


EFFICACITÉ

• Évaluation de l'adaptabilité de la brosse à la forme des dents

La méthode d'évaluation utilisée est une modification de la méthode publiée de Yankel et al 1997. Elle consiste à utiliser du papier photographique monochrome enroulé autour de profils artificiels qui simulent les dents antérieures et postérieures. Durant le brossage, les poils de la brosse à dents s'adaptent à la forme de ces profils et pénètrent dans les espaces interdentaires, ce qui se traduit par des "taches" blanches sur le papier photographique.

La distance maximale (mm) entre ces taches blanches a été mesurée et s'exprime en DPIV : Dynamic Interproximal Penetration Value ou Valeur de Pénétration Interproximale Dynamique.

Évaluation in vitro de l'adaptabilité de la brosse à un profil de modèle de dents

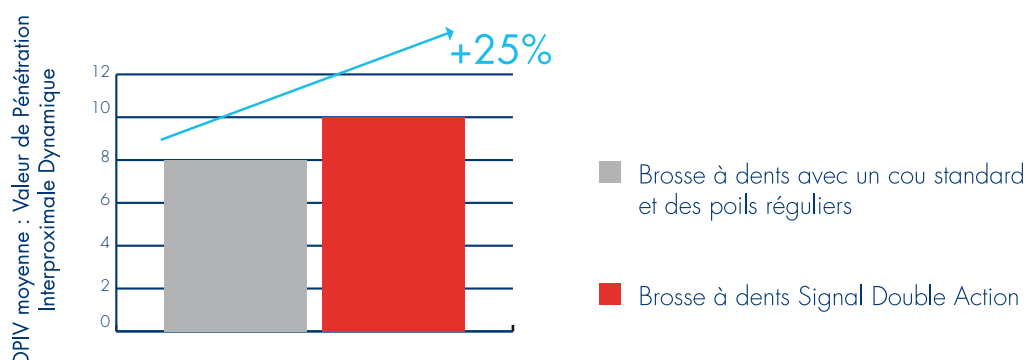

Signal Double Action offre +25% d'adaptabilité à la forme des dents par rapport à une brosse avec un cou standard et des poils réguliers.

- **Des tests complémentaires** ont aussi été réalisés afin de prouver l'efficacité de la brosse à dents Double Action. Notamment, une évaluation clinique a permis de mesurer l'indice de plaque dans la bouche, avant et après brossage avec Torsion. Cette étude a ainsi mis en évidence que Signal Double Action aide à éliminer de façon significative la plaque bactérienne dans toute la bouche.

